


DMG MiniDam

DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 · 22547 Hamburg · Germany · www.dmg-dental.com
092891BR/2026-09



Handling

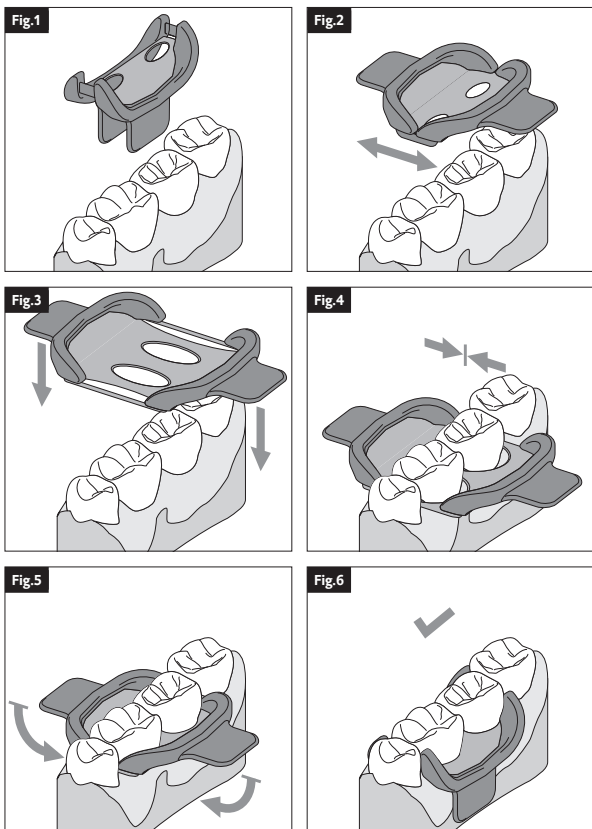

Instruções de uso

Português

Descrição do produto

O dispositivo para proteção gengival é composto de silicone e é usado para permitir um ambiente relativamente seco na área proximal entre dois dentes e para proteger a gengiva contra materiais odontológicos.

Finalidade prevista

Estabelecer um ambiente relativamente seco na presença de dentição completa, por exemplo, ao usar o Icon ou materiais de restauração à base de compósito.

Limitações de uso

Não é apropriado para ambientes totalmente secos.

Indicações

- Cáries
- Fluorose
- Manchas idiopáticas ou induzidas por trauma
- Perda de substância dentária por cáries, trauma, abrasão dentária ou transtornos de desenvolvimento

Contraindicações

Não usar o material, caso o usuário tenha histórico de alergias de contato a qualquer um dos componentes deste produto.

Grupos-alvo de pacientes

Pessoas em tratamento durante um procedimento odontológico.

Usuários a que se destinam

Dentista

Observações sobre o uso

- O MiniDam DMG é descartável e, por razões de higiene, deve ser usado em um único paciente.
- Evite danificar o dispositivo de proteção gengival com fio dental ou outros materiais. Não utilize dispositivos de proteção gengival danificados.

Aplicação recomendada

1. Limpe a área de trabalho.
2. Caso os dentes estejam muito próximos um do outro: afaste-os utilizando uma cunha.
3. Estique previamente o dispositivo de proteção gengival puxando as abas afastando-as cuidadosamente.
4. Posicione o dispositivo de proteção gengival sobre os dentes afetados. Verifique se as abas estão apontando para a direção da área de tratamento (Fig. 1).
5. Separe as abas (Fig. 2).
6. Coloque a seção interdental do dispositivo de proteção gengival na posição proximal.

Observação: a seção interdental mesial é usada para proteger a área de tratamento.

7. Puxe o dispositivo de proteção gengival na direção da gengiva até que as seções interdentais se posicionem na área proximal (Fig. 3).
8. Solte o dispositivo de proteção gengival (Fig. 4).
9. Dobre o dispositivo de proteção gengival cervicalmente nos dentes isolados.
10. Dobre as abas cervicalmente (Fig. 5).
11. Remova as cunhas.
12. Verifique se o dispositivo de proteção gengival encontra-se bem assentado e corrija, se necessário (Fig. 6).
13. Se necessário, podem ser tomadas medidas adicionais para assegurar um ambiente seco (p.ex. rolos de algodão, aspiração).
14. Efetue o tratamento.
15. Remova o dispositivo de proteção gengival e descarte-o.

Interações medicamentosas

Atualmente, não há informações sobre interações com outros materiais.

Riscos residuais/efeitos colaterais

Até à data não são conhecidos quaisquer efeitos colaterais. Apesar disso, pode haver risco residual de hipersensibilidade aos componentes do produto

Advertências/precauções

- Manter longe do alcance de crianças!
- Siga as instruções de uso dos fabricantes de outros produtos que podem ser usados com os materiais.
- Caso ocorram incidentes graves relacionados a este produto, eles devem ser comunicados ao fabricante, bem como às autoridades de registro responsáveis.

Características de desempenho do dispositivo

- Resistência ao desgaste ≥ 15 [N]
- Resistência à tração ≥ 15 [mm]

Armazenamento/eliminação

- Armazenar em local seco a uma temperatura entre 15 e 25 °C (59 e 77 °F)!
- Eliminar o material de acordo com a legislação nacional em vigor.

Composição

Elastômeros de silicone (aproximadamente 99%), pigmentos, aditivos

Fabricante: DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH ·
Elbgaustraße 248 · 22547 Hamburgo · Alemanha
Detentor da Notificação: DMG do Brasil Ltda · Av. das Nações
Unidas, 14261 · Anexo B, Esc. 26-115 · Vl. Gertrudes · São Paulo/SP.
Not. ANVISA: 10346410101

Instructions for useEnglish

Product description

The gingival protection device is composed of silicone and is used to facilitate a relatively dry environment in the proximal area between two teeth and to protect the gingiva against dental materials.

Intended purpose

Establishing a relatively dry environment in the presence of complete dentition, for example when using Icon or Composite filling materials.

Limitations of use

Not suitable for establishing absolutely dry environments.

Indication

- Caries
- Fluorosis
- Idiopathic or trauma induced spots
- Loss of tooth substance due to trauma, tooth abrasion or development disorders

Contraindication

Do not use the material where there are known allergies to any of the components or contact allergies.

Patient target group

People treated in the course of a dental procedure.

Intended user

Dentist

Notes for use

- The DMG MiniDam is for single use and for hygienic reasons can only be used on one patient.
- Avoid damaging the gingival protection device with dental floss or other materials. Do not use damaged gingival protection devices.

Recommended use

1. Clean the working area.
2. If the teeth are very close together: separate the teeth using a wedge.
3. Pre-stretch the gingival protection device by gently pulling the tabs apart.
4. Position the gingival protection device over the affected teeth. Make sure that the tabs are pointing in the direction of the area being worked on (Fig. 1).
5. Pull the tabs apart (Fig. 2).
6. Place the interdental section of the gingival protection device in the proximal position.

Note: The middle interdental section is used to protect the working area.

7. Pull the gingival protection device towards the gingiva until the interdental sections are positioned in the proximal area (Fig 3).
8. Release the gingival protection device (Fig. 4).
9. Fold the gingival protection device cervically where the teeth are isolated.
10. Fold the tabs cervically (Fig. 5).
11. Remove wedges as appropriate.
12. Verify that the gingival protection device is properly seated and correct if required (Fig. 6).
13. Further measures to facilitate a dry environment (e.g. cotton rolls, aspiration) can be carried out as required.
14. Perform treatment.
15. Remove the gingival protection device and discard.

Interactions

No interactions with other materials are currently known.

Residual risks/side effects

There are no known side effects to date. The residual risk of hypersensitivity to components of the material cannot be ruled out.

Warnings/precautions

- Keep out of the reach of children!
- Follow the manufacturer’s instructions for other products that are used with the material/ materials.
- Serious incidents involving this product must be reported to the manufacturer and to the responsible registration authorities.

Product performance characteristics

- Tear strength ≥ 15 [N]
- Tensile strength ≥ 15 [mm]

Storage/disposal

- Store in a dry place at 15 to 25 °C (59 to 77 °F)!
- Dispose of in accordance with national regulations.

Composition

Silicone elastomers (approx. 99 %), pigments, additives

Packaging

20 pcs	REF 220381
--------	------------